

AXIMA Confidence™

ЧАСПРОЛІТНИЙ МАС-СПЕКТРОМЕТР З ІОНІЗАЦІЄЮ В МАТРИЦІ (MALDI)




- Висока роздільна здатність рефлектрону
- Висока чутливість у всіх режимах
- Швидкісний іонний фільтр з роздільною здатністю > 200 Азотний лазер 50 Гц, гарантія 60 млн спалахів
- Осьова ортогональна геометрія опромінення з реєстрованою потужністю (337 нм)
- Безграткова іонна оптика
- Електронний помножувач для реєстрації іонів у лінійному режимі
- Функція підвищеної роздільної здатності для низьких мас у режимі MS/MS
- Рефлектрон нелінійного поля нової геометрії
- Seamless PSD™ - безперервна реєстрація фрагментації метастабільних іонів
- Тримачі зразків формату стандартних мікротитраційних планшет
- Різноманітні адаптери для біочипів, мікроскопічних слайдів, CD та ін.
- Зв'язок з комп'ютером по порту USB
- Сумісність з ВЕРХ (Accuspot і Probot)
- Вбудована функція картування зображень із застосуванням хемопринтера CHIP


Гнучка продуктивна система з інтуїтивним керуванням для аналітичних та біотехнологічних лабораторій забезпечує максимум результативності при мінімальному введенні даних.

Спеціальні пакети програмного забезпечення для автоматизації експериментів у протеоміці, аналізі олігонуклеотидів/праймерів, ВЕРХ-МАЛДІ, дослідженні полімерів, гістологічному картуванні, скринінгу біомаркерів, лікарських сполук та їх метаболітів.

Повна системна підтримка приладів: діагностика в реальному часі або дистанційна діагностика; вибір контрактів сервісного обслуговування; навчання у спеціалізованих центрах або на місці встановлення відповідно до прикладних завдань.

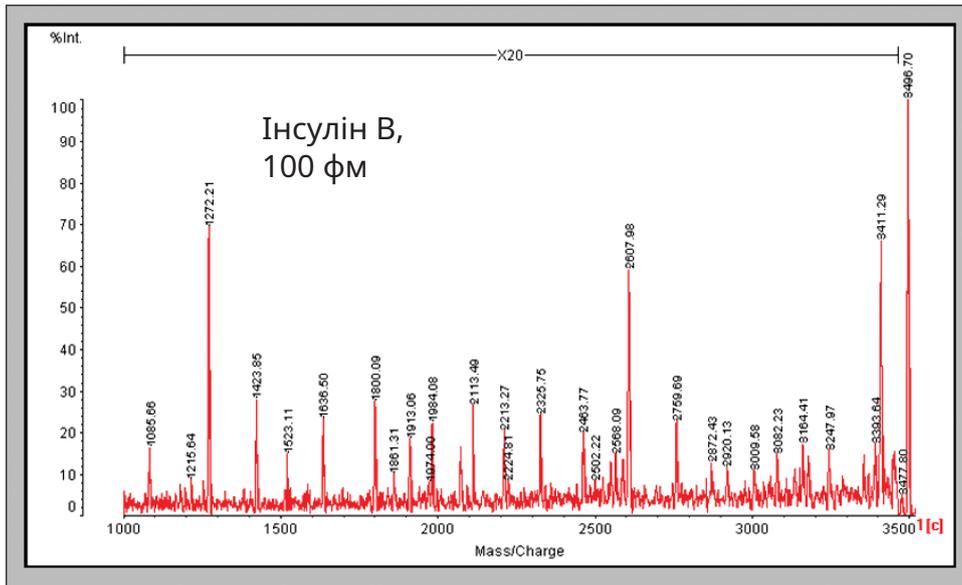

Мас-спектр високого дозволу метастабільного іона та його фрагментів (sPSD)

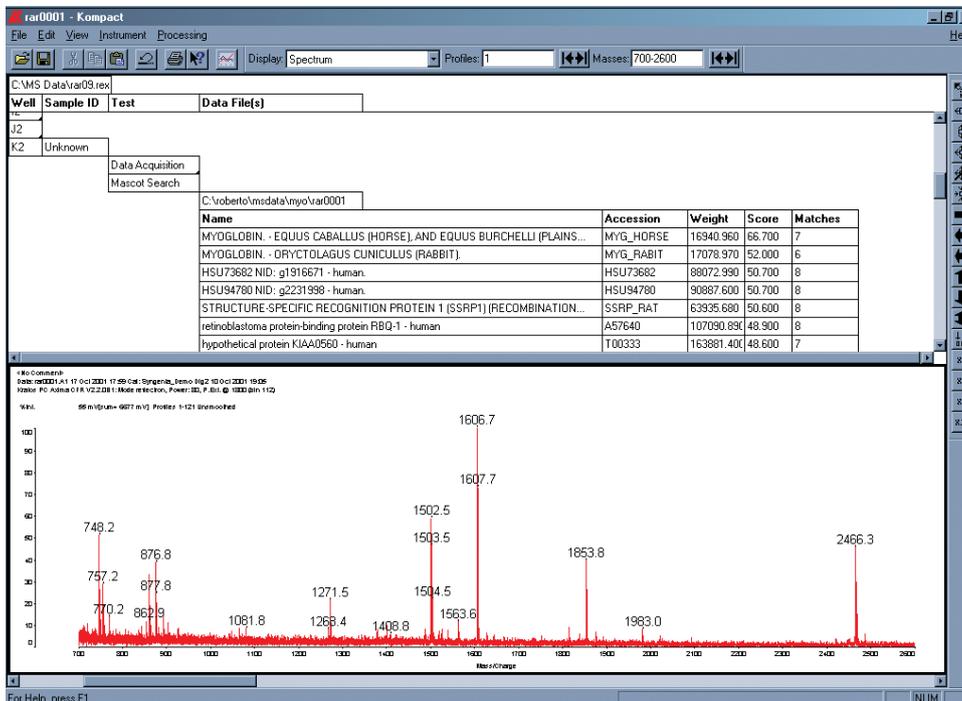

Повністю автоматична ідентифікація білків на основі безперервного результат-залежного мас-типуння пептидів з тандемною мас-спектрометрією



WWW.SHIMADZU.COM.UA • WWW.SHIMADZU.COM • WWW.SHIMADZU.EU

ТОВ «ШімЮкрейн» - Генеральний дистриб'ютор аналітичного обладнання **SHIMADZU** в Україні та Республіці Молдова

Адреса: Київ, 01042, вул. Дмитра Дорошенка 18, офіс 429

Тел/факс: (044) 284-24-85; 284-54-97; 390-00-23

E-mail: shimukraine@gmail.com

Веб-Сайт: www.shimadzu.com.ua www.shimadzu.eu www.shimadzu.com